

Allergie gegen pflanzliche Nahrungsmittel

ImmunoCAP™ Spezifisches IgE


ThermoFisher
SCIENTIFIC

ImmunoCAP™ Allergenkomponenten	Profilin*	PR-10	LTP	Speicherproteine	Andere‡
ImmunoCAP™ Allergenextrakte	Asymptomatisch¹ (üblicherweise)	Lokale Reaktionen¹ (überwiegend)	Lokale und systemische Reaktionen¹	Systemische Reaktionen¹	
Erdnuss (f13)	Profilin*	Ara h 8 (f352)	Ara h 9 (f427)	Ara h 1 (f422) Ara h 2 (f423) Ara h 3 (f424) Ara h 6 (f447)	
Haselnuss (f17)	Profilin*	Cor a 1 (f428)	Cor a 8 (f425)	Cor a 9 (f440) Cor a 14 (f439)	
Walnuss** (f256)	Profilin*		Jug r 3 (f442)	Jug r 1 (f441)	
Cashewnuss*** (f202)	Profilin*			Ana o 2**** Ana o 3 (f443)	
Paranuss (f18)	Profilin*			Ber e 1 (f354)	
Soja (f14)	Profilin*	Gly m 4 (f353)		Gly m 5 (f431) Gly m 6 (f432)	
Sesam (f10)	Profilin*			Ses i 1 (f449)	
Buchweizen (f11)				Fag e 2****	
Kiwi (f84)	Profilin*	Act d 8 (f430)			Act d 1 / Act d 2 / Act d 5****
Apfel (f49)	Profilin*	Mal d 1 (f434)	Mal d 3 (f435)		
Pfirsich (f95)	Pru p 4 (f421)	Pru p 1 (f419)	Pru p 3 (f420)		Pru p 7 (f454)
Sellerie (f85)	Profilin*	Api g 1 (f417)			
Weizen (f4)	Profilin*		Tri a 14 (f433)	Tri a 19 (f416) Gliadin (f98)	
Bei der Interpretation der Testergebnisse ist die Anam- nese zu berücksichtigen.	Kreuzreaktivität			Risiko	

‡ Act d 1 --> Cysteinoprotease, Act d 2 --> Thaumatin-ähnliches Protein, Act d 5--> Kiwellin, Pru p 7--> giberellinreguliertes Protein (GRP), Tri a 19 --> Omega-5-Gliadin

* Alternative Marker für Profilin: Phl p 12, Bet v 2 oder Pru p 4. ** Patienten mit Sensibilisierung gegen Pekannuss weisen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Sensibilisierung gegen Walnuss auf und umgekehrt. Jug r 1 und Jug r 3 können daher als Risikomarker sowohl für eine Pekan- als auch eine Walnussallergie verwendet werden.¹ *** Patienten mit Sensibilisierung gegen Pistazie weisen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Sensibilisierung gegen Cashewnuss auf und umgekehrt. Ana o 3 kann daher als Risikomarker für eine Allergie gegen Pistazien sowie gegen Cashewnüsse verwendet werden.¹ **** Nur auf ImmunoCAP ISAC_{TE112}

Risikostratifizierung

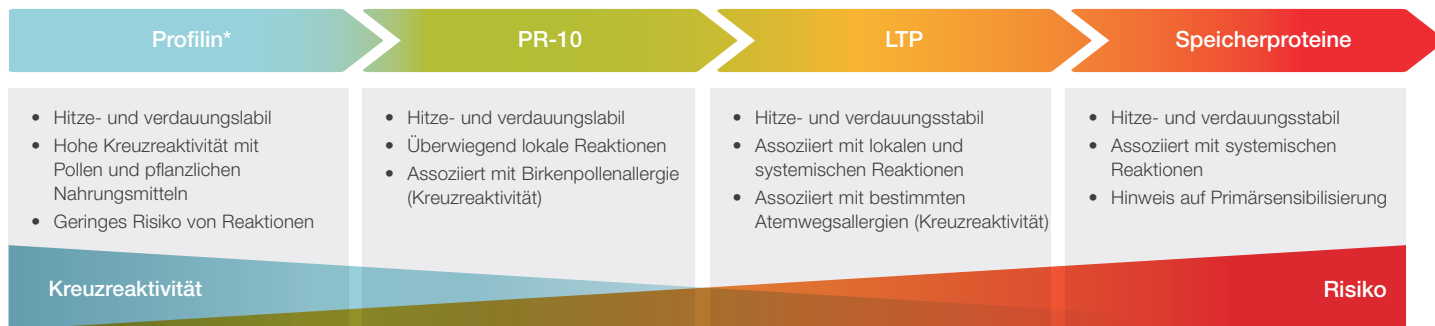

Literatur: 1. Dramburg et al. *Pediatr Allergy Immunol.* 2023;34 Suppl 28:e13854.

Offizielle Produktnamen: ImmunoCAP Allergen f17, Hazelnut; ImmunoCAP Allergen f428, Allergen component rCor a 1 PR-10 Hazelnut; ImmunoCAP Allergen f425, Allergen component rCor a 8 Hazelnut; ImmunoCAP Allergen f440, Allergen component nCor a 9 Hazelnut; ImmunoCAP Allergen f439, Allergen component rCor a 14 Hazelnut; ImmunoCAP Allergen f256, Walnut; ImmunoCAP Allergen f441, Allergen component rJug r 1 Walnut; ImmunoCAP Allergen f442, Allergen component rJug r 3 LTP, Walnut; ImmunoCAP Allergen f18, Brazil nut; ImmunoCAP Allergen f354, Allergen component rBer e 1 Brazil nut; ImmunoCAP Allergen f202, Cashew nut; ImmunoCAP Allergen f443, Allergen component rAna o 3, Cashew nut; ImmunoCAP Allergen f13, Peanut; ImmunoCAP Allergen f422, Allergen component rAra h 1 Peanut; ImmunoCAP Allergen f423, Allergen component rAra h 2 Peanut; ImmunoCAP Allergen f424, Allergen component rAra h 3 Peanut; ImmunoCAP Allergen f447, Allergen component rAra h 6 Peanut; ImmunoCAP Allergen f352, Allergen component rAra h 8 PR-10, Peanut; ImmunoCAP Allergen f427, Allergen component rAra h 9 L TP, Peanut; ImmunoCAP Allergen f14, Soybean; ImmunoCAP Allergen f431, Allergen component nGly m 5 beta-conglycinin, Soy; ImmunoCAP Allergen f432, Allergen component nGly m 6 Glycinin, Soy; ImmunoCAP Allergen f353, Allergen component rGly m 4 PR-10, Soy; ImmunoCAP Allergen f10, Sesame seed; ImmunoCAP Allergen f449, Allergen component rSes i 1 Sesame seed. ImmunoCAP Allergen f95, Peach; ImmunoCAP Allergen f419, Allergen component rPru p 1 PR-10, Peach; ImmunoCAP Allergen f420, Allergen component rPru p 3 LTP; Peach; ImmunoCAP Allergen f421, Allergen component rPru p 4 Profilin, Peach; ImmunoCAP Allergen f454, Allergen component rPru p 7 Peach; ImmunoCAP Allergen f4, Wheat; ImmunoCAP Allergen f416, Allergen component rTri a 19 Omega-5 Gliadin, Wheat; ImmunoCAP Allergen f433, Allergen component rTri a 14 LTP, Wheat; ImmunoCAP Allergen f49, Apple; ImmunoCAP Allergen f85, Celery; ImmunoCAP Allergen f434, Allergen component rMal d 1 PR-10, Apple; ImmunoCAP Allergen f435, Allergen component rMal d 3 LTP, Apple; ImmunoCAP Allergen f430, ImmunoCAP Allergen f84, Kiwi; Allergen component rAct d 8 PR-10, Kiwi; ImmunoCAP Allergen f417, Allergen component rApi g 1 PR-10, Celery; ImmunoCAP Allergen f98, Gliadin

 Mehr erfahren auf thermofisher.com/allergencomponents

© 2025 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle Warenzeichen sind das Eigentum von Thermo Fisher Scientific und ihrer Tochtergesellschaften, sofern nicht anders angegeben. Verantwortlicher Hersteller: Phadia AB (Teil von Thermo Fisher Scientific). 453351.AL.EU2.DE.V1.25