

Componentes de alérgenos de alimentos vegetales

ThermoFisher
SCIENTIFIC


Tests ImmunoCAP™ Specific IgE

ImmunoCAP™ componentes de alérgenos	Profilina*	PR-10	LTP	Proteínas de almacenamiento	Otros†
ImmunoCAP™ alérgenos completos	Asintomática¹ (normalmente)	Reacciones locales¹ (principalmente)	Reacciones locales y sistémicas¹	Reacciones sistémicas¹	
Cacahuete (f13)	Profilina*	Ara h 8 (f352)	Ara h 9 (f427)	Ara h 1 (f422) Ara h 2 (f423) Ara h 3 (f424) Ara h 6 (f447)	
Avellana (f17)	Profilina*	Cor a 1 (f428)	Cor a 8 (f425)	Cor a 9 (f440) Cor a 14 (f439)	
Nuez** (f256)	Profilina*		Jug r 3 (f442)	Jug r 1 (f441)	
Anacardo*** (f202)	Profilina*			Ana o 2**** Ana o 3 (f443)	
Nuez de Brasil (f18)	Profilina*			Ber e 1 (f354)	
Soja (f14)	Profilina*	Gly m 4 (f353)		Gly m 5 (f341) Gly m 6 (f342)	
Sésamo (f10)	Profilina*			Ses i 1 (f449)	
Trigo sarraceno (f11)				Fag e 2****	
Kiwi (f84)	Profilina*	Act d 8 (f430)			Act d 1/ Act d 2/ Act d 5****
Manzana (f49)	Profilina*	Mal d 1 (f434)	Mal d 3 (f435)		
Melocotón (f95)	Pru p 4 (f421)	Pru p 1 (f419)	Pru p 3 (f420)		Pru p 7 (f454)
Apio (f85)	Profilina*	Api g 1 (f417)			
Trigo (f4)	Profilina*		Tri a 14 (f433)	Tri a 19 (f416) Gliadina (f98)	
Los resultados se deben interpretar siempre en el contexto de la historia clínica.	Reactividad cruzada			Riesgo	

† Act d 1 --> cisteína proteasa, Act d 2 --> proteína similar a la taumatina, Act d 5--> proteína defensiva, Pru p 7--> proteína regulada por giberelina (GRP), Tri a 19 --> gliadina omega-5

* Marcadores sustitutivos de la profilina: Phl p 12, Bet v 2 o Pru p 4. ** Es muy probable que los pacientes sensibilizados a la nuez pecana lo estén a la nuez de nogal y viceversa. Por lo tanto, se pueden utilizar Jug r 1 y Jug r 3 como marcadores del riesgo de alergia tanto a la nuez pecana como a la nuez de nogal.¹ *** Los pacientes sensibilizados al pistacho tienen muchas probabilidades de estarlo al anacardo y viceversa. Por lo tanto, se puede utilizar Ana o 3 como marcador del riesgo de alergia tanto al pistacho como al anacardo.¹ **** Prueba ImmunoCAP ISAC_{E112} únicamente

Estratificación del riesgo

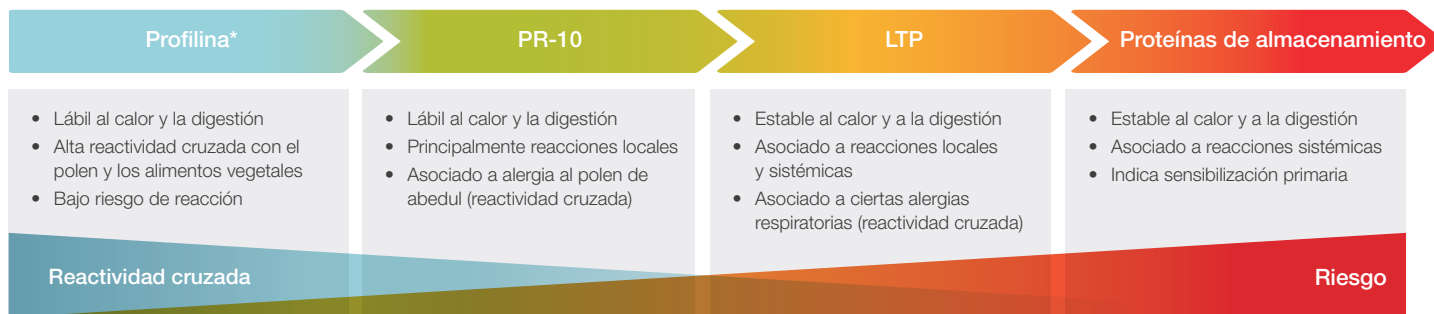

Referencias: 1. Dramburg et al. *Pediatr Allergy Immunol.* 2023;34 Suppl 28:e13854.

Nombres oficiales de los productos: ImmunoCAP Allergen f17, Hazelnut; ImmunoCAP Allergen f428, Allergen component rCor a 1 PR-10 Hazelnut; ImmunoCAP Allergen f425, Allergen component rCor a 8 Hazelnut; ImmunoCAP Allergen f440, Allergen component nCor a 9 Hazelnut; ImmunoCAP Allergen f439, Allergen component rCor a 14 Hazelnut; ImmunoCAP Allergen f256, Walnut; ImmunoCAP Allergen f441, Allergen component rJug r 1 Walnut; ImmunoCAP Allergen f442, Allergen component rJug r 3 LTP, Walnut; ImmunoCAP Allergen f18, Brazil nut; ImmunoCAP Allergen f354, Allergen component rBer e 1 Brazil nut; ImmunoCAP Allergen f202, Cashew nut; ImmunoCAP Allergen f443, Allergen component rAna o 3, Cashew nut; ImmunoCAP Allergen f13, Peanut; ImmunoCAP Allergen f422, Allergen component rAra h 1 Peanut; ImmunoCAP Allergen f423, Allergen component rAra h 2 Peanut; ImmunoCAP Allergen f424, Allergen component rAra h 3 Peanut; ImmunoCAP Allergen f447, Allergen component rAra h 6 Peanut; ImmunoCAP Allergen f352, Allergen component rAra h 8 PR-10, Peanut; ImmunoCAP Allergen f427, Allergen component rAra h 9 LTP, Peanut; ImmunoCAP Allergen f14, Soybean; ImmunoCAP Allergen f431, Allergen component nGly m 5 beta-conglycinin, Soy; ImmunoCAP Allergen f432, Allergen component nGly m 6 Glycinin, Soy; ImmunoCAP Allergen f353, Allergen component rGly m 4 PR-10, Soy; ImmunoCAP Allergen f10, Sesame seed; ImmunoCAP Allergen f449, Allergen Component rSes i 1 Sesame seed. ImmunoCAP Allergen f95, Peach; ImmunoCAP Allergen f419, Allergen component rPru p 1 PR-10, Peach; ImmunoCAP Allergen f420, Allergen component rPru p 3 LTP, Peach; ImmunoCAP Allergen f421, Allergen component rPru p 4 Profilin, Peach; ImmunoCAP Allergen f454, Allergen component rPru p 7 Peach; ImmunoCAP Allergen f4, Wheat; ImmunoCAP Allergen f416, Allergen component rTri a 19 Omega-5 Gliadin, Wheat; ImmunoCAP Allergen f433, Allergen component rTri a 14 LTP, Wheat; ImmunoCAP Allergen f49, Apple; ImmunoCAP Allergen f85, Celery; ImmunoCAP Allergen f435, Allergen component rMal d 3 LTP, Apple; ImmunoCAP Allergen f434, Allergen component rMal d 1 PR-10, Apple; ImmunoCAP Allergen f430, ImmunoCAP Allergen f84, Kiwi, Allergen component rAct d 8 PR-10, Kiwi; ImmunoCAP Allergen f417, Allergen component rApi g 1 PR-10, Celery; ImmunoCAP Allergen f98, Gliadin

 Más información en thermofisher.com/allergencomponents

© 2025 Thermo Fisher Scientific Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de Thermo Fisher Scientific y de sus filiales, salvo que se especifique lo contrario. Fabricante legal: Phadia AB (miembro de Thermo Fisher Scientific). 453351.AL.EU4.ES.V1.25