

Allergènes moléculaires des aliments d'origine végétale

Tests d'IgE spécifiques ImmunoCAP™


ThermoFisher
SCIENTIFIC

ImmunoCAP™ Allergènes moléculaires	Profiline*	PR-10	LTP	Protéines de stockage	Autres†
ImmunoCAP™ Extraits allergéniques	Asymptomatique¹ (habituellement)	Réactions locales¹ (principalement)	Réactions locales et systémiques¹	Réactions systémiques¹	
Arachide (f13)	Profiline*	Ara h 8 (f352)	Ara h 9 (f427)	Ara h 1 (f422) Ara h 2 (f423) Ara h 3 (f424) Ara h 6 (f447)	
Noisette (f17)	Profiline*	Cor a 1 (f428)	Cor a 8 (f425)	Cor a 9 (f440) Cor a 14 (f439)	
Noix** (f256)	Profiline*		Jug r 3 (f442)	Jug r 1 (f441)	
Noix de cajou*** (f202)	Profiline*			Ana o 2**** Ana o 3 (f443)	
Noix du Brésil (f18)	Profiline*			Ber e 1 (f354)	
Soja (f14)	Profiline*	Gly m 4 (f353)		Gly m 5 (f431) Gly m 6 (f432)	
Sésame (f10)	Profiline*			Ses i 1 (f449)	
Sarrasin (f11)				Fag e 2****	
Kiwi (f84)	Profiline*	Act d 8 (f430)			Act d 1 / Act d 2 / Act d 5****
Pomme (f49)	Profiline*	Mal d 1 (f434)	Mal d 3 (f435)		
Pêche (f95)	Pru p 4 (f421)	Pru p 1 (f419)	Pru p 3 (f420)		Pru p 7 (f454)
Céleri (f85)	Profiline*	Api g 1 (f417)			
Blé (f4)	Profiline*		Tri a 14 (f433)	Tri a 19 (f416) Gliadine (f98)	
L'interprétation des résultats doit tenir compte de l'histoire clinique.	Réactivité croisée			Risque	

‡ Act d 1 --> protéase à cystéine, Act d 2 --> protéine thaumatine-like, Act d 5--> protéine de défense, Pru p 7--> protéine régulée par la gibbérelline (GRP), Tri a 19 --> oméga-5 gliadine

* Marqueurs de substitution pour la profiline : Phl p 12, Bet v 2 ou Pru p 4. ** Les patients sensibilisés à la noix de pécan ont une forte probabilité d'être sensibilisés à la noix, et inversement. Jug r 1 et Jug r 3 peuvent donc être utilisés comme marqueurs de risque de l'allergie à la noix de pécan et à la noix. *** Les patients sensibilisés à la pistache ont une forte probabilité d'être aussi sensibilisés à la noix de cajou, et inversement. Ana o 3 peut donc être utilisé comme marqueur de risque pour l'allergie à la pistache et à la noix de cajou. **** Test ImmunoCAP™ ISAC^{En112} uniquement

Stratification du risque

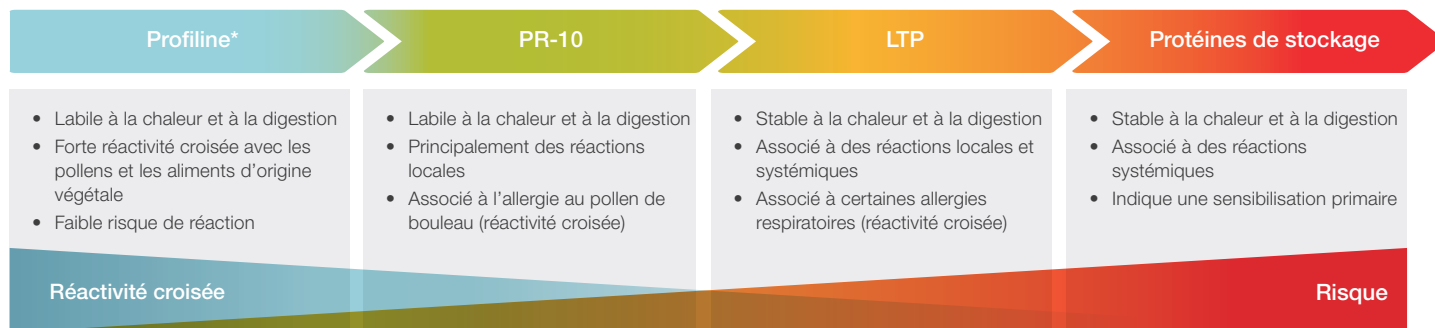

Références : 1. Dramburg et al. *Pediatr Allergy Immunol.* 2023;34 Suppl 28:e13854.

Nom officiel des produits : ImmunoCAP Allergen f17, Hazelnut; ImmunoCAP Allergen f428, Allergen component rCor a 1 PR-10 Hazelnut; ImmunoCAP Allergen f425, Allergen component rCor a 8 Hazelnut; ImmunoCAP Allergen f440, Allergen component nCor a 9 Hazelnut; ImmunoCAP Allergen f439, Allergen component rCor a 14 Hazelnut; ImmunoCAP Allergen f256, Walnut; ImmunoCAP Allergen f441, Allergen component rJug r 1 Walnut; ImmunoCAP Allergen f442, Allergen component rJug r 3 LTP, Walnut; ImmunoCAP Allergen f18, Brazil nut; ImmunoCAP Allergen f354, Allergen component rBer e 1 Brazil nut; ImmunoCAP Allergen f202, Cashew nut; ImmunoCAP Allergen f443, Allergen component rAna o 3, Cashew nut; ImmunoCAP Allergen f13, Peanut; ImmunoCAP Allergen f422, Allergen component rAra h 1 Peanut; ImmunoCAP Allergen f423, Allergen component rAra h 2 Peanut; ImmunoCAP Allergen f424, Allergen component rAra h 3 Peanut; ImmunoCAP Allergen f447, Allergen component rAra h 6 Peanut; ImmunoCAP Allergen f352, Allergen component rAra h 8 PR-10, Peanut; ImmunoCAP Allergen f427, Allergen component rAra h 9 L TP, Peanut; ImmunoCAP Allergen f14, Soybean; ImmunoCAP Allergen f431, Allergen component nGly m 5 beta-conglycinin, Soy; ImmunoCAP Allergen f432, Allergen component nGly m 6 Glycinin, Soy; ImmunoCAP Allergen f353, Allergen component rGly m 4 PR-10, Soy; ImmunoCAP Allergen f10, Sesame seed; ImmunoCAP Allergen f449, Allergen Component rSes i 1 Sesame seed. ImmunoCAP Allergen f95, Peach; ImmunoCAP Allergen f419, Allergen component rPru p 1 PR-10, Peach; ImmunoCAP Allergen f420, Allergen component rPru p 3 LTP; Peach; ImmunoCAP Allergen f421, Allergen component rPru p 4 Profilin, Peach; ImmunoCAP Allergen f454, Allergen component rPru p 7 Peach; ImmunoCAP Allergen f4, Wheat; ImmunoCAP Allergen f416, Allergen component rTri a 19 Omega-5 Gliadin, Wheat; ImmunoCAP Allergen f433, Allergen component rTri a 14 LTP, Wheat; ImmunoCAP Allergen f49, Apple; ImmunoCAP Allergen f85, Celery; ImmunoCAP Allergen f434, Allergen component rMal d 1 PR-10, Apple; ImmunoCAP Allergen f435, Allergen component rMal d 3 LTP, Apple; ImmunoCAP Allergen f430, ImmunoCAP Allergen f84, Kiwi; Allergen component rAct d 8 PR-10, Kiwi; ImmunoCAP Allergen f417, Allergen component rApi g 1 PR-10, Celery; ImmunoCAP Allergen f98, Gliadin

Pour en savoir plus : thermofisher.com/allergencomponents

Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage et/ou dans la notice d'utilisation du réactif (disponible sur le site www.dfu.phadia.com).
 Pris en charge par l'assurance maladie. © 2025 Thermo Fisher Scientific Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de Thermo Fisher Scientific et de ses filiales, sauf indication contraire. Fabricant légal : Phadia AB (membre de Thermo Fisher Scientific).
 453351.AL.EU3.FR.V1.25 IDDALL356_03-2025