

Componenti alimentari vegetali allergenici

Test per le IgE specifiche ImmunoCAP™


ThermoFisher
SCIENTIFIC

Componenti molecolari ImmunoCAP™	Profilina*	PR-10	LTP	Proteine di deposito	Altri‡
Allergeni estrattivi ImmunoCAP™	Asintomatico¹ (generalmente)	Reazioni locali¹ (principalmente)	Reazioni locali e sistemiche¹	Reazioni sistemiche¹	
Arachidi (f13)	Profilina*	Ara h 8 (f352)	Ara h 9 (f427)	Ara h 1 (f422) Ara h 2 (f423) Ara h 3 (f424) Ara h 6 (f447)	
Nocciole (f17)	Profilina*	Cor a 1 (f428)	Cor a 8 (f425)	Cor a 9 (f440) Cor a 14 (f439)	
Noce** (f256)	Profilina*		Jug r 3 (f442)	Jug r 1 (f441)	
Anacardi*** (f202)	Profilina*			Ana o 2**** Ana o 3 (f443)	
Noce brasiliana (f18)	Profilina*			Ber e 1 (f354)	
Soia (f14)	Profilina*	Gly m 4 (f353)		Gly m 5 (f341) Gly m 6 (f342)	
Sesamo (f10)	Profilina*			Ses i 1 (f449)	
Grano saraceno (f11)				Fag e 2****	
Kiwi (f84)	Profilina*	Act d 8 (f430)			Act d 1 / Act d 2 / Act d 5****
Mela (f49)	Profilina*	Mal d 1 (f434)	Mal d 3 (f435)		
Pesca (f95)	Pru p 4 (f421)	Pru p 1 (f419)	Pru p 3 (f420)		Pru p 7 (f454)
Sedano (f85)	Profilina*	Api g 1 (f417)			
Grano (f4)	Profilina*		Tri a 14 (f433)	Tri a 19 (f416) Gliadina (f98)	
I risultati devono sempre essere interpretati nel contesto dell'anamnesi clinica.	Cross-reattività			Rischio	

‡ Act d 1 --> cistein-proteasi, Act d 2 --> proteina simile alla taumatina, Act d 5--> kiwellina, Pru p 7--> proteina regolata dalla gibberellina (GRP), Tri a 19 --> gliadina omega-5

* Marker surrogati della profilina: Phl p 12, Bet v 2 o Pru p 4. **I pazienti sensibilizzati alle noci pecan hanno probabilità molto elevate di essere sensibilizzati anche alle noci e viceversa. Jug r 1 e Jug r 3 possono quindi essere utilizzati come indicatori di rischio per l'allergia sia alle noci pecan che alle noci ***I pazienti sensibilizzati al pistacchio hanno probabilità molto elevate di essere sensibilizzati anche agli anacardi e viceversa. Ana o 3 può quindi essere utilizzato come indicatore di rischio per l'allergia sia ai pistacchi che agli anacardi. **** Solo nel test ImmunoCAP ISAC_{ET12}

Stratificazione del rischio

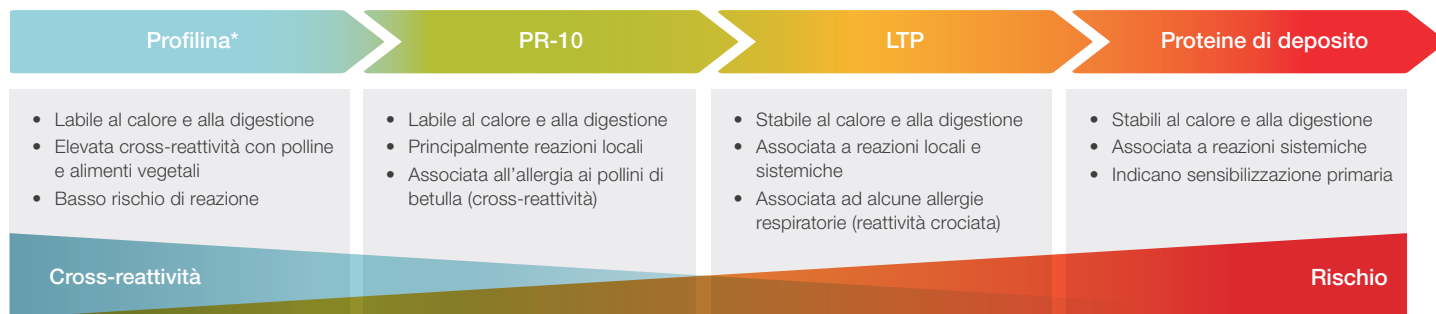

Bibliografia: 1. Dramburg et al. *Pediatr Allergy Immunol.* 2023;34 Suppl 28:e13854.

Nomi ufficiali dei prodotti: ImmunoCAP Allergen f17, Hazelnut; ImmunoCAP Allergen f428, Allergen component rCor a 1 PR-10 Hazelnut; ImmunoCAP Allergen f425, Allergen component rCor a 8 Hazelnut; ImmunoCAP Allergen f440, Allergen component nCor a 9 Hazelnut; ImmunoCAP Allergen f439, Allergen component rCor a 14 Hazelnut; ImmunoCAP Allergen f256, Walnut; ImmunoCAP Allergen f441, Allergen component rJug r 1 Walnut; ImmunoCAP Allergen f442, Allergen component rJug r 3 LTP, Walnut; ImmunoCAP Allergen f18, Brazil nut; ImmunoCAP Allergen f354, Allergen component rBer e 1 Brazil nut; ImmunoCAP Allergen f202, Cashew nut; ImmunoCAP Allergen f443, Allergen component rAna o 3, Cashew nut; ImmunoCAP Allergen f13, Peanut; ImmunoCAP Allergen f422, Allergen component rAra h 1 Peanut; ImmunoCAP Allergen f423, Allergen component rAra h 2 Peanut; ImmunoCAP Allergen f424, Allergen component rAra h 3 Peanut; ImmunoCAP Allergen f447, Allergen component rAra h 6 Peanut; ImmunoCAP Allergen f352, Allergen component rAra h 8 PR-10, Peanut; ImmunoCAP Allergen f427, Allergen component rAra h 9 L TP, Peanut; ImmunoCAP Allergen f14, Soybean; ImmunoCAP Allergen f431, Allergen component nGly m 5 beta-conglycinin, Soy; ImmunoCAP Allergen f432, Allergen component nGly m 6 Glycinin, Soy; ImmunoCAP Allergen f353, Allergen component rGly m 4 PR-10, Soy ImmunoCAP Allergen f10, Sesame seed; ImmunoCAP Allergen f449, Allergen component rSes i 1 Sesame seed. ImmunoCAP Allergen f95, Peach; ImmunoCAP Allergen f419, Allergen component rPru p 1 PR-10, Peach; ImmunoCAP Allergen f420, Allergen component rPru p 3 LTP;Peach; ImmunoCAP Allergen f421, Allergen component rPru p 4 Profilin, Peach; ImmunoCAP Allergen f454, Allergen component rPru p 7 Peach ImmunoCAP Allergen f4, Wheat; ImmunoCAP Allergen f416, Allergen component rTri a 19 Omega-5 Gliadin, Wheat; ImmunoCAP Allergen f433, Allergen component rTri a 14 LTP, Wheat, ImmunoCAP Allergen f49, Apple, ImmunoCAP Allergen f85, Celery, ImmunoCAP Allergen f434, Allergen component rMal d 1 PR-10, Apple, ImmunoCAP Allergen f435, Allergen component rMal d 3 LTP, Apple, ImmunoCAP Allergen f430, ImmunoCAP Allergen f84, Kiwi, Allergen component rAct d 8 PR-10, Kiwi ImmunoCAP Allergen f417, Allergen component rApi g 1 PR-10, Celery , ImmunoCAP Allergen f98, Gliadin

 Maggiori informazioni su thermofisher.com/allergencomponents

© 2025 Thermo Fisher Scientific Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi sono di proprietà di Thermo Fisher Scientific e delle sue affiliate, a meno che non sia altrimenti specificato. Produttore legale: Phadia AB (parte di Thermo Fisher Scientific). 453351.AL.EU5.IT.V1.25