

Riduci i costi del tuo laboratorio

Il test EliA Calprotectin 2 offre:

La capacità di escludere correttamente le malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD), al primo dosaggio⁶

Utilizzando un test con valore predittivo negativo (NPV) elevato, è possibile aiutare i Clinici di riferimento ad escludere correttamente l'IBD; aiutando, grazie a un basso tasso di falsi positivi, a ridurre il numero di endoscopie evitabili e portando quindi ad un risparmio sui costi della sanità

Un test ottimizzato per risparmiare tempo e ridurre i costi legati alla diagnosi

Grazie all'ampio pannello di test gastrointestinali disponibili su Phadia Laboratory Systems, in un unico flusso di lavoro, è possibile eseguire i test per identificare o escludere: IBS, IBD, Celiachia, Allergia al frumento e Sensibilità al glutine non celiaca

La possibilità di introdurre un sistema strumentale dedicato

Grazie al ridotto ingombro dello strumento Phadia 250*, è possibile testare EliA Calprotectin 2 in laboratori con le più diverse routine e ricevere i risultati sulla stessa rete utilizzando il software Phadia Prime

*Lo strumento Phadia 250 è in grado di eseguire oltre 700 diversi test ImmunoCAP ed EliA

RIFERIMENTI

1. Scherl EJ, et al. Gastroenterology and endoscopy new special edition. Ottobre 2013. Disponibile su http://www.gastroendoneews.com/download/UC_IBDgen0513_WM.pdf; ultimo accesso gennaio 2020. 2. Vavrika SR, et al. Inflamm Bowel Dis 2012;18:496-505. 3. Schoepfer AM, et al. Am J Gastroenterology 2013;108:1744-1753. 4. Furfaro F, et al. Outcomes of conservatively managed acute small bowel obstruction and predictors for subsequent surgery in Crohn's disease. Poster No P187 on the 9th congress of ECCO, Copenhagen, Denmark, 2014. 5. Sabatino A, et al. Previous misdiagnosis and diagnostic delay in inflammatory bowel diseases. Poster No P118 on the 6th congress of ECCO, Dublin, Ireland, 2011. 6. Wulandari AA, Schulz J, Hartmann F, Dignass A, Stein J. Poster No 119 presented at 11th Congress of ECCO, Amsterdam, Netherlands, 2016 e 48. 7. EliA Calprotectina 2. Modo d'uso.

Maggiori informazioni su allergyai.com/uk/lab

© 2020 Thermo Fisher Scientific Inc. Tutti i diritti riservati.

Tutti i marchi commerciali sono di proprietà di Thermo Fisher Scientific e delle sue controllate, se non diversamente specificato. 2019-21.AI.EU1.EN.v1.19

ThermoFisher
SCIENTIFIC

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Riduci i costi del tuo laboratorio

Test EliA Calprotectin 2: escludere le malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) in modo corretto, al primo dosaggio

Riduzione del numero di endoscopie evitabili

La diagnosi precoce delle malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) è associata a esiti migliori per il paziente

Al 35% dei pazienti con IBD viene prima diagnosticata erroneamente la sindrome dell'intestino irritabile (IBS) – il tempo medio per la diagnosi del morbo di Crohn (CrD) è di 18 mesi^{1,2}


La diagnosi precoce è associata a:



EliA Calprotectin 2 può aiutare i Clinici a ridurre i costi sanitari

In base ad un volume di 1.000 test eseguiti in laboratorio e alla prevalenza del 2%, ciò significa che: **EliA™ Calprotectin 2 differenzia correttamente 105 pazienti aggiuntivi** (IBD e non IBD) rispetto al fornitore 1 (746 vs. 641,5)

EliA Calprotectin 2 riduce anche il numero di risultati falsi positivi di 104 unità rispetto al fornitore 1 (253,8 rispetto a 357,7), che porta ad una riduzione di 104 endoscopie evitabili. **Inoltre, un potenziale risparmio sui costi di 41.288 €** basato su un costo endoscopico medio di 397 €

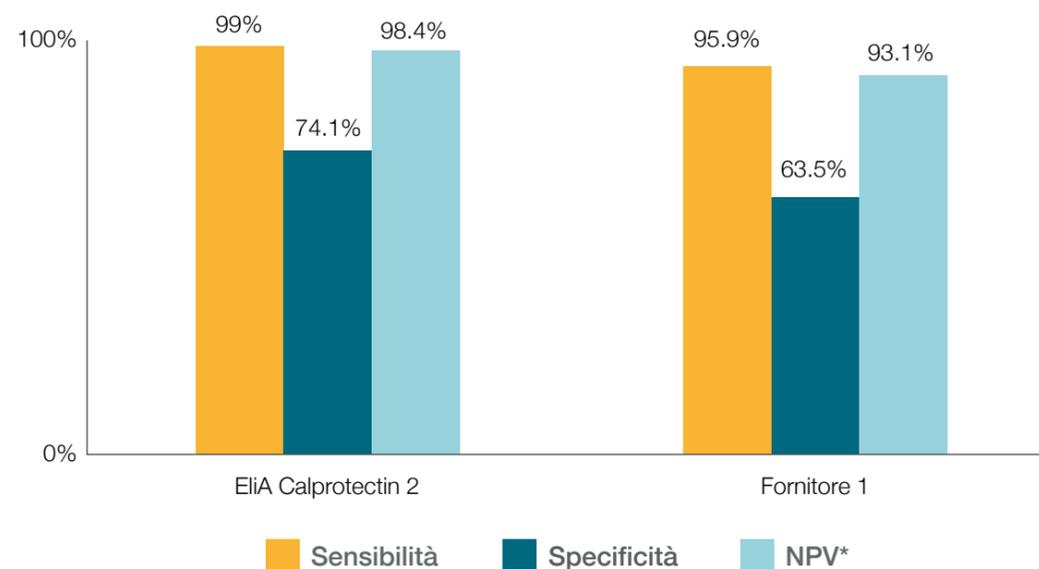

*Valore predittivo negativo
Prestazioni del test EliA Calprotectin 2 e di un altro fornitore in 99 pazienti con IBD sintomatica e 83 pazienti di controllo con malattia intestinale funzionale⁶

Un partner su cui poter contare per semplificare i processi di laboratorio

Flusso di lavoro ottimizzato – a sostegno del vostro approccio

Si integra facilmente nei flussi di lavoro già esistenti

Il test EliA Calprotectin 2 può essere eseguito contemporaneamente ad altri test ematici EliA ed ImmunoCAP™

Fornisce una maggiore flessibilità alla routine di laboratorio

Il tampone ottimizzato per l'estrazione delle feci permette agli estratti fecali di rimanere stabili per tre giorni a temperatura ambiente⁷

Un test veloce e accurato

I campioni fecali standard sono processati automaticamente dai sistemi Phadia™

Riduzione dei costi

Elevato intervallo di misurazione per una minore diluizione dei campioni altamente positivi

Test EliA Calprotectin 2 e sistema Phadia 250: fatti su misura



- 1 Usa un unico sistema anche per i campioni fecali
- 2 È possibile testare EliA Calprotectin 2 in laboratori con le più diverse routine
- 3 Software Phadia Prime integra tutti i risultati in un'unica rete
- 4 In grado di eseguire oltre 700 diversi test ImmunoCAP ed EliA
- 5 Definisce pannelli diagnostici unici sulla base delle esigenze dei tuoi Clinici
- 6 Riduce il numero di test in service esterno presso altri laboratori, grazie a uno strumento automatizzato studiato appositamente per gli spazi contenuti